
Benodigdheden

- Glucometer Accu-Guide
- Teststrips voor Accu-Check Guide
- Accu-Chek Guide controles L1 en L2
- Formulier voor registratie controleresultaten (voor week 1-26 of voor week 27-52)

Werkwijze

Frequentie = 1x per week, afwisselend level L1 en L2

Uitz: meters in spoedkoffers slechts 1x/maand gezien laag verbruik.

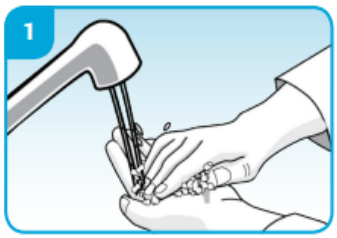

Was de handen met warm water en zeep, en droog ze goed af.



Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen vervallen teststrips.



Druk de teststrip naar boven, oefen een beetje druk uit met de duim en neem de teststrip uit de flacon. Sluit daarna voorzichtig het deksel.



Voer de teststrip in de meter in de richting van de pijl. De meter start automatisch. Een knipperend druppelsymbool wordt op het scherm weergegeven. Voer nu een vingerprik uit.



5. Voer de kwalteitscontrole uit, gelijkaardig aan een patiëntentest.

6. Bij het aanbrengen van de controleoplossing aan de strip herkent de meter dit als controleoplossing.

7. Op de display wordt het resultaat en het symbool van een flesje controleoplossing weergegeven.Er wordt gevraagd om de level te selecteren. Druk op **OK** om de aangegeven level te selecteren indien deze klopt.

8.Binnen bereik en ✔ worden op de display weergegeven, als het resultaat van de functiecontrolemeting binnen het controlewaardenbereik ligt.

Buiten bereik en ✘ worden op de display weergegeven, als het resultaat van de functiecontrolemeting buiten het controlewaardenbereik ligt.
De controlewaardenbereiken staan op het etiket van de flacon teststrips gedrukt. Indien de bekomen resultaten hierbuiten liggen, gelieve de controle te herhalen. Indien deze buiten het bereik blijven, neem contact op met het labo.

9. Vul het resultaat in op het controleformulier (weken 1-26 of 27-52).

Indien problemen bij gebruik van de meter: neem contact op met het labo (7320)