1 - Zet toestel aan via de blauwe knop.



2 - Druk op [GO!] op het scherm.




3 - Steek de cartridge in het toestel wanneer dit beeld op het scherm verschijnt (cartridge moet op **kamertemperatuur** zijn!)



.

4 - Druk op [SCAN] (" ") wordt weergegeven op het scherm) en **scan uw badge in bij "OID" (Operator ID)**. Druk nadien op [SAVE].

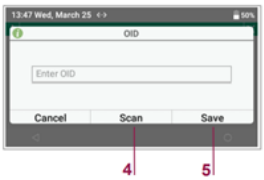

5 - Duw op de balk bij **"PID" (Patiënt ID) en scan het polsbandje van de patiënt in.** Druk op [SAVE].


Wacht met de staalafname tot " " van het scherm verdwijnt en de cartridge opgewarmd is.

6 - Nu heb je max. 5 minuten tijd:

- Neem het staal af.
- **Verwijder de eerste staaldruppel uit de spuit op een doekje.**
- **Voeg daarna exact 1 druppel staal uit de spuit toe aan het staalcupje op de cartridge.**



7 - **Druk nadien meteen op [ ]. Het toestel start de analyse.**

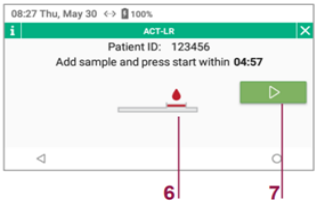

8 - Er klinkt een akoestisch signaal en het resultaat wordt weergegeven op het scherm. U kan nu de cartridge verwijderen.



Opmerking: wanneer de cartridge niet verwijderd wordt sturen de resultaten niet goed door naar het patiëntendossier.

- [Result Details]: bekijk details van dit resultaat:



  - Voeg evt. een opmerking toe via [ ].
- [New Test]: start nieuwe test indien gewenst.
- Via [ ] op het startscherm kan je resultaten terug opzoeken.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het toestel op het einde van de dag aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk zodat de EQC automatisch wordt uitgevoerd om 01:00 AM.
- Gebruik Incidin Oxywipes om opgedroogde bloedresten of andere vervuiling van de behuizing van het instrument te verwijderen.
- Bij problemen neem contact op met het klinisch labo op het nummer **7320.**