Benodigdheden:

- Afinion 2 analysator
- Testcassette op kamertemperatuur
- Priklancet Safety-Lancet Super van Sarstedt
- Niet-steriele compressen


Uitvoering:

1



Trek het capillair recht omhoog uit de testcartridge.

2

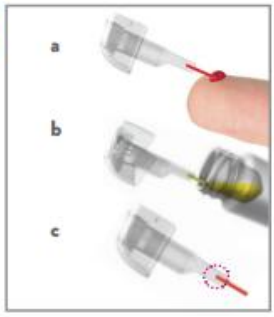

Vul het capillair volledig (c) met patiëntmonster (a) of controlemateriaal (b). Veeg het capillair niet schoon.

3



Plaats het capillair onmiddellijk terug. De analyse van de testcartridge moet binnen 1 minuut starten.

4



Raak aan voor patiëntmonsters of voor controlemateriaal. Het deksel wordt automatisch geopend.

5



Plaats de testcartridge met de streepjescode naar links.

6



Sluit het deksel met de hand om de analyse te starten.

7



Raak aan en voer de patiënt-ID in of raak aan en voer de controle-ID in. Raak aan om te bevestigen.

8



Noteer het resultaat wanneer het op het scherm verschijnt. Raak aan om te aanvaarden. Het deksel wordt automatisch geopend.

9



Verwijder de gebruikte testcartridge en gooi deze weg. Sluit het deksel handmatig wanneer de analyzer niet in gebruik is.